



INDUSTRIAS
RHINO

FICHA TÉCNICA

☎ 947 594 779
☎ 991 322 768

Av. Hubert Lanssier
Mz. C Lt. 37, Lurigancho
Lima, Perú

**FÉRULAS
NEUMÁTICAS**



01 DESCRIPCIÓN

El Kit de Férulas Neumáticas es un conjunto de inmovilización diseñado para brindar soporte inmediato a extremidades lesionadas. Ideal para emergencias médicas y situaciones prehospitalarias. Su diseño inflable permite una adaptación rápida y segura a diferentes tamaños de extremidades.

02 MATERIAL

- **Material:** PVC transparente resistente.



Sistema de Embotellado

Detiene superficialmente las hemorragias y brinda la protección para posibles infecciones.

Puede ser utilizado en las **extremidades** tanto izquierdas como derechas.



INDUSTRIAS
RHINO

FICHA TÉCNICA

☎ 947 594 779
☎ 991 322 768

Av. Hubert Lanssier
Mz. C Lt. 37, Lurigancho
Lima, Perú

**FÉRULAS
NEUMÁTICAS**



03 DISEÑO & CARACTERÍSTICAS

- Conjunto completo de **6 férulas inflables**.
- **Material resistente** y transparente para visualización.
- Válvulas de **inflado de fácil uso**.
- **Adaptables** a extremidades superiores e inferiores.
- **Reutilizables** tras desinfección adecuada.
- Proporciona **inmovilización inmediata**.
- **Facilita** el manejo prehospitalario de fracturas.
- **Reduce el dolor** y previene lesiones adicionales.
- Fácil almacenamiento y transporte.

04 MODELO & PRESENTACIÓN

Modelo: Inflable 6 piezas

Color: Transparente

Kit contiene:

- 1 férula para pierna completa, 1 férula para media pierna, 1 férula para pie y tobillo, 1 férula para brazo completo, 1 férula para medio brazo y 1 férula para muñeca
- Estuche para transportar y un inflador manual.



Producto
Importado

www.industriashino.com



INDUSTRIAS
RHINO

FICHA TÉCNICA

**FÉRULAS
NEUMÁTICAS**




05 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIÓN	MEDIDAS
• Férula para pierna completa	82 cm x 30 cm
• Férula para media pierna	66.5 cm x 28 cm
• Férula para pie y tobillo	37.5 cm x 25.5 cm
• Férula para brazo completo	76 cm x 23 cm
• Férula para medio brazo	61.5 cm x 21 cm
• Férula para muñeca	37.5 cm x 18.5 cm
• Incluye: un Inflador manual de Aire.	

06 CÓMO USAR LA FÉRULA NEUMÁTICA

- > Selecciona la férula adecuada para la extremidad lesionada.
- > Colócala cuidadosamente alrededor de la extremidad.
- > Infla con la válvula hasta lograr firmeza sin incomodar al paciente.
- > Verifica correcta inmovilización.
- > Desinfla y limpia después de cada uso si es reutilizable.

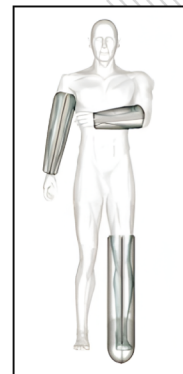

07 APLICACIONES

Es una herramienta indispensable para uso en emergencias, ambulancias, kits de primeros auxilios, paramédicos, personal de rescate, guías de montaña y entornos prehospitalarios.

☎ 947 594 779

☎ 991 322 768

Av. Hubert Lanssier
Mz. C Lt. 37, Lurigancho
Lima, Perú

www.industriashino.com